



GEBRAUCHSANWEISUNG

STUHLANALYSE

ALLGEMEINE HINWEISE:

NICHT BEI DURCHFALL:

Sammeln Sie eine Stuhlprobe nicht, wenn Sie akuten Durchfall haben. Zu flüssige Stuhlproben können nicht untersucht werden.

PROBENMENGEN BEACHTEN:

Halten Sie sich an die jeweilige Anleitung zur Sammlung einer Stuhlprobe, da andernfalls eine Untersuchung nicht durchgeführt werden kann.

PROBENSAMMLUNG MONTAG BIS DONNERSTAG:

Um eine zeitnahe Zustellung zum BIO-LABOR Hemer zu gewährleisten, sollte der Versand der Stuhlprobe(n) montags bis donnerstags erfolgen.

PROBEN KÜHL LAGERN:

Lagern Sie in der Zeit zwischen Probenentnahme und Versand Ihre Stuhlprobe(n) aufrecht im Kühlschrank.


PATIENTENDATEN ÜBERPRÜFEN:

Überprüfen und korrigieren Sie ggf. Ihre Patientendaten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, etc.) im beiliegenden Auftragsformular.

VORBEREITUNGEN:

i EINEN ABEND VOR DER PROBENSAMMLUNG:

Um mögliche Pilznester von der Darmwand zu lösen, trinken Sie **am Abend vor der Probensammlung ein großes Glas Wasser verdünnt mit 3 Esslöffeln Apfelessig.**

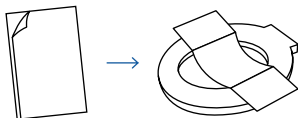

SCHRITT 1:

Benutzen Sie die Stuhlfanghilfe gemäß der aufgedruckten Anleitung. **Beachten Sie, dass der Stuhl nicht mit dem Toilettenwasser in Berührung kommen darf!** Scheiden Sie den Stuhl über der Stuhlfanghilfe aus.


Folgen Sie dann der jeweiligen Anleitung für die Ihnen vorliegenden Stuhlröhrchen.

ANLEITUNG STUHLRÖHRCHEN BRAUN/ROT:

i EINE PROBENSAMMLUNG NÖTIG:


Sammeln Sie eine Probe von einem Stuhlgang.

Für parasitäre Untersuchungen werden Proben von 2-3 Stuhlgängen benötigt.

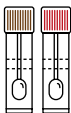


SCHRITT 2:

Folgen Sie dieser Anleitung, wenn Sie ein **braunes** und/oder **rotes** Stuhlröhrchen vorliegen haben.

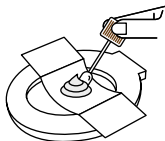

SCHRITT 3:


Schrauben Sie das **braune/rote** Stuhlröhrchen auf und entnehmen Sie erbsengroße Mengen von verschiedenen Stellen des Stuhls.

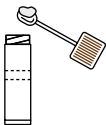

SCHRITT 4:

Füllen Sie das **braune/rote** Stuhlröhrchen so auf, dass Sie auf die angegebene Füllhöhe kommen.


ACHTUNG! Ein Über- oder Unterfüllen kann die Messergebnisse verfälschen!

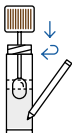

SCHRITT 5:

Verschließen Sie das **braune/rote** Probenröhrchen fest und **versehen Sie es nun mit Ihrem Namen**. Verwenden Sie dafür einen wasserfesten Stift.

Bei parasitärer Untersuchung: Wiederholen Sie die Schritte 1–5 und folgen dann Schritt 6.

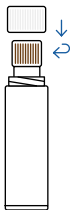

SCHRITT 6:

Stecken Sie das **braune/rote** Stuhlröhrchen in den passenden Transportcontainer und verschließen Sie ihn fest.

Folgen Sie bei weiteren beiliegenden Stuhlröhrchen der entsprechenden Anleitung oder springen Sie zum Schritt **VERSAND**.

ANLEITUNG STUHLRÖHRCHEN HB/HP-KOMPLEX:


i SPITZE EINMAL EINFÜHREN:

Für das **weiße Stuhlröhrchen** sind nur minimale Stuhlmengen erforderlich. **Vermeiden Sie es, den Stuhl mit der Dosierspitze in das Röhrchen zu schaufeln. Achten Sie darauf, die im weißen Stuhlröhrchen enthaltene Pufferlösung nicht zu verschütten.**



SCHRITT 2:

Folgen Sie dieser Anleitung, wenn Sie ein **weißes Stuhlröhrchen** vorliegen haben.

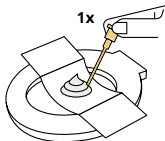

SCHRITT 3:

Ziehen Sie den gelben Entnahmestab aus dem Stuhlröhrchen heraus. **Führen Sie die Dosier- spitze einmal in den Stuhl ein und ziehen diese mit einer Drehbewegung heraus.**



SCHRITT 4:

Schieben Sie den Entnahmestab zurück in das Stuhlröhrchen und drücken ihn fest rein. **Versehen Sie es nun mit Ihrem Namen. Verwenden Sie dafür einen wasserfesten Stift.**



SCHRITT 5:

Stecken Sie das Stuhlröhrchen in den passenden Transportcontainer und verschließen Sie ihn fest.

Folgen Sie bei weiteren beiliegenden Stuhlröhrchen der entsprechenden Anleitung oder springen Sie zum Schritt **VERSAND**.

ANLEITUNG STUHLRÖHRCHEN HISTAMIN:


i SPITZE DREIMAL EINFÜHREN:

Für das **blaue Stuhlröhrchen** sind nur minimale Stuhlmengen erforderlich. **Vermeiden Sie es, den Stuhl mit der Dosierspitze in das Röhrchen zu schaufeln.** Achten Sie darauf, die im **blauen Stuhlröhrchen** enthaltene Pufferlösung nicht zu verschütten.



SCHRITT 2:


Folgen Sie dieser Anleitung, wenn Sie ein **blaues Stuhlröhrchen** vorliegen haben.

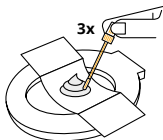

SCHRITT 3:

Drehen Sie den gelben Entnahmestab gegen den Uhrzeigersinn und ziehen ihn langsam aus dem Stuhlröhrchen heraus. **Führen Sie die Dosierspitze dreimal an unterschiedlichen Stellen des Stuhls ein und ziehen diese jeweils mit einer Drehbewegung heraus.**

i Achten Sie darauf, dass nur die Rillen des orangenen Stabs mit Probe befüllt sind.

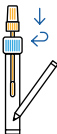

SCHRITT 4:

Schieben Sie den Entnahmestab zurück in das Probenröhrchen und **versehen Sie es mit Ihrem Namen**. Verwenden Sie dafür einen wasserfesten Stift.




SCHRITT 5:

Stecken Sie das Stuhlröhrchen in den passenden Transportcontainer und verschließen Sie ihn fest.

Folgen Sie bei weiteren beiliegenden Stuhlröhrchen der entsprechenden Anleitung oder springen Sie zum Schritt **VERSAND.**

VERSAND:

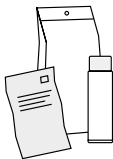

Legen Sie die bestückten **Transportcontainer inkl. dem ausgefüllten Auftragsformular** in den Rücksendeumschlag. Verschließen Sie den Umschlag sorgfältig und geben Sie ihn in einer Postfiliale ab.

Nach Abschluss unserer Laboruntersuchung wird sich Ihr Behandler mit Ihnen in Verbindung setzen, um das Ergebnis zu besprechen.